


# WELCOME TO YOUR SMARTSTEP<sup>TM</sup> QUICK-START GUIDE

PLEASE READ THIS GUIDE BEFORE PROCEEDING

## MAIN FEATURES

- ① ANTI MICROBIAL GRIP
- ② MANUAL LIGHT - CLICK FOR 30 SEC/HOLD FOR ON
- ③ FLASHLIGHT SWITCH
- ④ EMERGENCY FLASHER SWITCH
- ⑤ PILOT LIGHT - FLASHES FOR RECHARGE
- ⑥ COLOR SELECT SWITCH RED/OFF/WHITE
- ⑦ FLASHLIGHT LAMP AND LIGHT SENSOR
- ⑧ CHARGING PORT
- ⑨ SAFETY CLUTCH FOR LENGTH ADJUSTMENT
- ⑩ LIGHT PIPE FOR MAIN LIGHT - RED OR WHITE
- ⑪ NON-SKID PATENTED CANE TIP

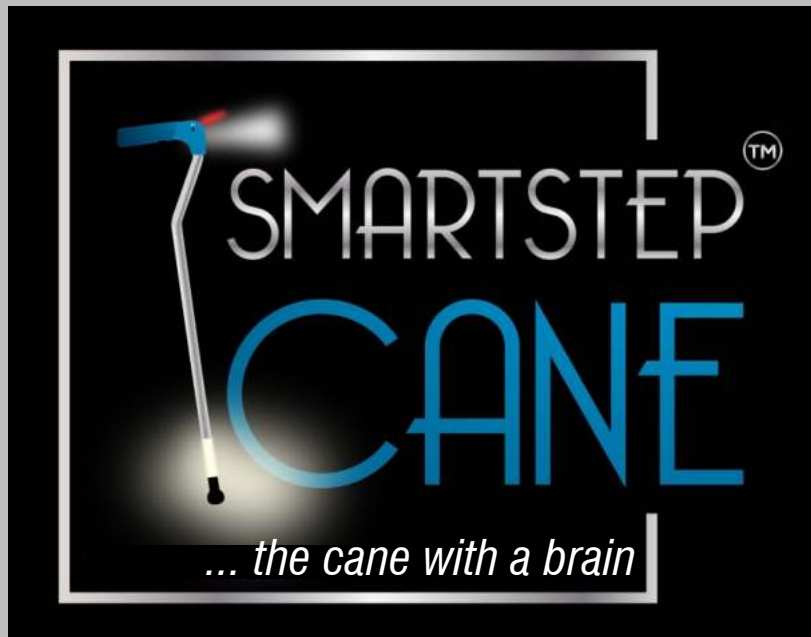

Thank you for your purchase. SMART-STEP WILL PROVIDE YOU WITH YEARS OF SERVICE. IT IS MADE WITH THE HIGHEST QUALITY MATERIALS AND HAS BEEN TESTED BY AN INDEPENDENT LABORATORY FOR LONG LIFE, STURDINESS, AND PERFORMANCE.

### **CAUTION!**

Although your cane is not completely water proof, the light pipe at the bottom of the cane is. However do not subject your cane to exposure to water or other liquids. A typical exposure to rain does not harm the cane. Wipe the cane dry in the event of rain or snow. Clean the cane as needed with a clean damp cloth. Do not use cleaning agents with alcohol or detergents.


**FOR BEST PERFORMANCE AND BATTERY LIFE, PLEASE CHARGE THE CANE FOR AT LEAST 8 HOURS BEFORE FIRST USE.**

### To Adjust Length

- 1-Loosen clutch
- 2-Press and hold button
- 3-Twist/Slide cane bottom to new length
- 4-Tighten clutch



**PATENT NOTICE:** THIS PRODUCT IS PROTECTED BY BOTH US AND FOREIGN PATENTS. SMART STEP IS A REGISTERED TRADEMARK OF SMART MEDICAL DEVICES, L.L.P.

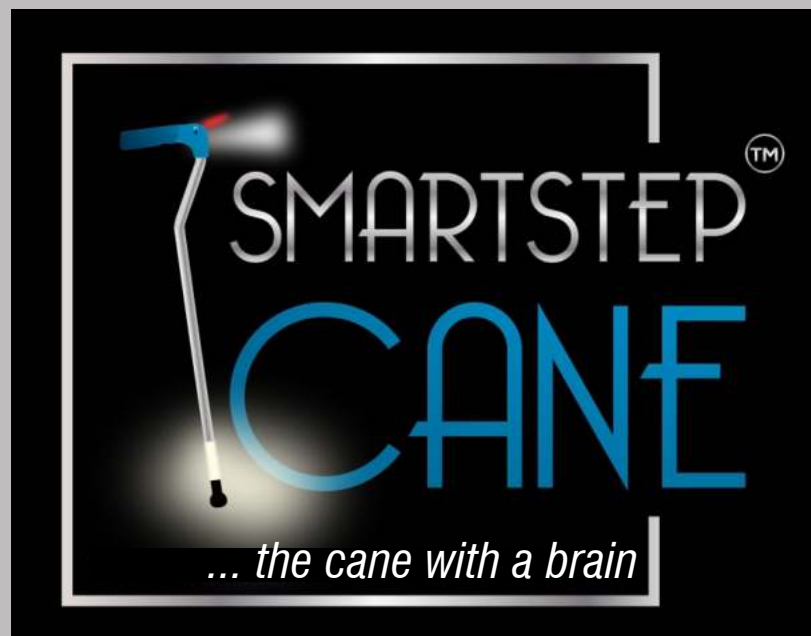

Gracias por su compra.  
**SMART-STEP LE PROPORCIONARÁ AÑOS DE SERVICIO. ESTÁ HECHO CON LOS MATERIALES DE MAYOR CALIDAD Y HA SIDO PROBADO POR UN LABORATORIO INDEPENDIENTE PARA UNA LARGA VIDA, SOLIDEZ Y RENDIMIENTO.**

**¡PRECAUCIÓN!**

Aunque su bastón no es completamente impermeable, el tubo de luz en la parte inferior del bastón lo es. Sin embargo, no exponga su bastón al agua u otros líquidos. Una exposición típica a la lluvia no dañará el bastón. Seque el bastón en caso de lluvia o nieve. Limpie el bastón según sea necesario con un paño limpio y húmedo. No use agentes de limpieza con alcohol o detergentes.

**PARA UN MEJOR RENDIMIENTO Y VIDA DE LA BATERÍA, POR FAVOR CARGUE EL BASTÓN DURANTE AL MENOS 8 HORAS ANTES DEL PRIMER USO.**

**BIENVENIDO A SU GUÍA DE INICIO RÁPIDO SMARTSTEP™  
 POR FAVOR, LEA ESTA GUÍA ANTES DE CONTINUAR**

**MAIN FEATURES**

- ① AGARRE ANTIMICROBIANO
- ② LUZ MANUAL: PRESIONE PARA 30 SEGUNDOS/ MANTENGA PRESIONADO PARA ENCENDER
- ③ INTERRUPTOR DE LINTERNA
- ④ INTERRUPTOR DE LINTERNA DE EMERGENCIA
- ⑤ LUZ PILOTO: DESTELLA PARA RECARGA
- ⑥ INTERRUPTOR DE SELECCIÓN DE COLOR ROJO/APAGADO/BLANCO
- ⑦ LÁMPARA DE LINTERNA Y SENSOR DE LUZ
- ⑧ PUERTO DE CARGA
- ⑨ SEGURIDAD DE CLUTCH PARA AJUSTE DE LONGITUD
- ⑩ TUBO DE LUZ PARA LUZ PRINCIPAL: ROJO O BLANCO
- ⑪ PUNTA DE BASTÓN CON PATENTE ANTIDESLIZANTE

Ajustar la longitud:

- 1- Aflojar el embrague
- 2- Presionar y mantener presionado el botón
- 3- Girar/deslizar la parte inferior del bastón a la nueva longitud
- 4- Apretar el embrague



**AVISO DE PATENTE: ESTE PRODUCTO ESTÁ PROTEGIDO POR PATENTES EN LOS ESTADOS UNIDOS Y EN EL EXTRANJERO. SMART STEP ES UNA MARCA REGISTRADA DE SMART MEDICAL DEVICES, L.L.P.**

